

SISTEMA ANTI-RONQUIDOS EN SPRAY PURANOX® 75 ml


Lea atentamente y por completo el folleto informativo antes de usar PuraNox®

Ronquidos

El ronquido es un sonido de gorgoteo, zumbido o serrado que se produce al respirar mientras se duerme. Los sonidos de ronquido habitualmente están causados por un estrechamiento de las vías respiratorias situadas por detrás de la campanilla o en la zona de la faringe detrás de la lengua (véase la zona oval en el dibujo). Esto crea un vacío en la garganta, donde el velo del paladar y la campanilla se unen con la lengua y las paredes de la faringe. El ronquido tiene lugar cuando estas estructuras vibran.

Existen diversos factores y condiciones que aumentan el riesgo de roncar:

- Un velo del paladar y una campanilla largos
- Debilitamiento del tejido muscular debido al envejecimiento. El consumo de alcohol y de algunos medicamentos (como pastillas contra el insomnio o tranquilizantes) también reducen la tensión del tejido muscular provocando que el mismo se afloje
- Exceso de peso, que hace que las paredes de la faringe se vuelvan más gruesas
- Irritación constante de la garganta, que puede hacer que la pared de la garganta se vuelva más gruesa
- Amígdalas dilatadas

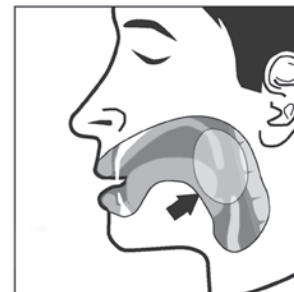

Algunos roncadores tienen una faringe tan estrecha que las vías respiratorias se obstruyen por completo durante más de 10 segundos durante el sueño. Esto recibe el nombre de apnea del sueño. PuraNox no constituye un remedio para la apnea del sueño. Si tiene síntomas de apnea del sueño, consulte a su médico.

¿Cómo funciona PuraNox?

El spray para la garganta PuraNox reduce las vibraciones del tejido blando de la parte posterior de la garganta por medio de la tensión y lubricación activas de los tejidos durante la noche. Sentirá un ligero cosquilleo temporal cuando pulverice PuraNox en la parte posterior de la garganta.

PuraNox:

- Previene y reduce los ronquidos
- Mejora la calidad del sueño
- Su sistema de administración asegura que el spray alcance fácilmente la parte posterior de la garganta

Ingredientes:

PuraNox está compuesto exclusivamente por extractos naturales.

No contiene ingredientes de origen animal, hormonas o conservantes.

Recipiente presurizado. El propelente (134A) está separado del líquido.

INCI :

Aqua, extracto de Ballota Nigra, extracto de Marrubium Vulgare, extracto de Zinziber Officinalis, Xilitol, Alcohol, Betaína, Glicerina, Oleth-20, Glicol Caprylyl, Piridoxidina HCL, Fosfatidilcolina, aceite de Pimpinella Anisum (Anís), aceite de Mentha Piperita (menta), aceite de Eucalyptus Globulus, Limoneno.

Contenido:

75 ml e para una media de 60 dosis.

Fecha de caducidad:

La fecha de caducidad aparece en la caja y en la base del recipiente.


Almacenamiento:

PuraNox debe almacenarse en un lugar seco y a temperatura ambiente. Recipiente presurizado: protéjalo del sol y no lo exponga a temperaturas superiores a 50°C. No lo perforo ni lo quemé, incluso una vez finalizado su uso. Manténgase fuera del alcance de los niños. No desechar en el ambiente.

SISTEMA ANTI-RONQUIDOS EN SPRAY PURANOX® 75 ml

Lea atentamente y por completo el folleto informativo antes de usar PuraNox®

Instrucciones de uso:

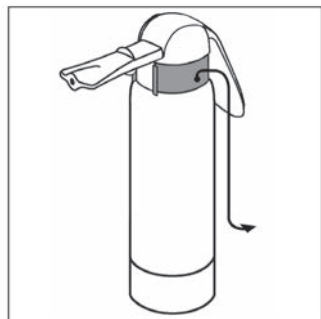

1

Sujete el seguro rojo con los dedos pulgar e índice y retírelo moviéndolo ligeramente hacia arriba y después tirando de él hacia atrás.



2

Póngalo en posición vertical. Incline la cabeza hacia atrás. Coloque el aplicador entre los dientes y los labios: los dientes delante del borde y los labios por detrás.




3

Presione la palanca con un dedo durante 1 segundo. Debe pulverizar la dosis adecuada directamente en la parte posterior de la garganta. Sentirá un ligero cosquilleo temporal en la parte posterior de la garganta.




4

Mantenga el líquido en la parte posterior de la garganta durante 10 segundos antes de tragarlo.

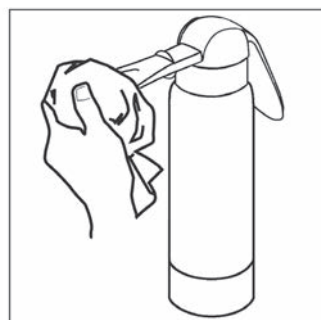

5

Tras su uso, limpie el aplicador y la cabeza del spray con un trapo limpio.

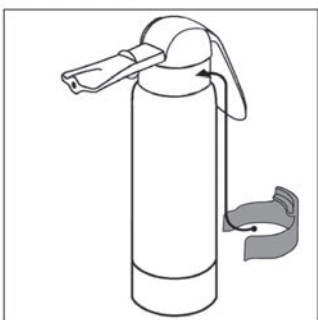

6

Tras su uso puede bloquear la palanca con el seguro rojo.



7

No coma ni beba tras la administración.

Para obtener los mejores resultados, no beba alcohol por lo menos una hora antes de su uso. Repita la aplicación durante la noche si fuera necesario.

Advertencias y precauciones de uso:

- Las personas con alergias deberán comprobar la lista de ingredientes y consultar a su médico si es necesario.
- No se recomienda el uso de PuraNox a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
- No debería aplicarse PuraNox en niños menores de 12 años.
- Los relajantes musculares, como pastillas contra el insomnio, o el alcohol pueden influir en la efectividad de PuraNox.
- No pulverice el spray hacia los ojos.

Para más información:

www.puranox.es

Preguntas:

Todas las preguntas sobre este producto deberán dirigirse al distribuidor.

Distribuido por: Reva Health S.L., Pl. Ausiàs March 1, 4º-D06, 08195 Sant Cugat del Vallès, Barcelona. info@reva-health.com

Fabricado por: PuraNox Trading BV, Europark 20, 4904 SX Oosterhout, Países Bajos

CE 0344

Julio 2011

59-34635-0610